

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka trójkołowa aluminiowa

Kod produktu: **RAPID**




1. Wykonanie

Podpórka trójkołowa składana wykonana jest z lekkiej ramy aluminiowej powlekanej lakierem z metalicznym połyskiem. Wyposażona w regulowane na wysokość ręczki, zakończone anatomicznymi uchwytami oraz hamulce z zaciskiem postojowym. Podpórka posiada koła o wąskim przekroju i średnicy 8'' oraz torbę zapinaną na zamek.

Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. hamulec
- c. linka hamulca
- d. pin blokujący rączkę
- e. torba
- f. rzep mocujący
- g. pin blokujący nóżkę
- h. regulacja hamulca

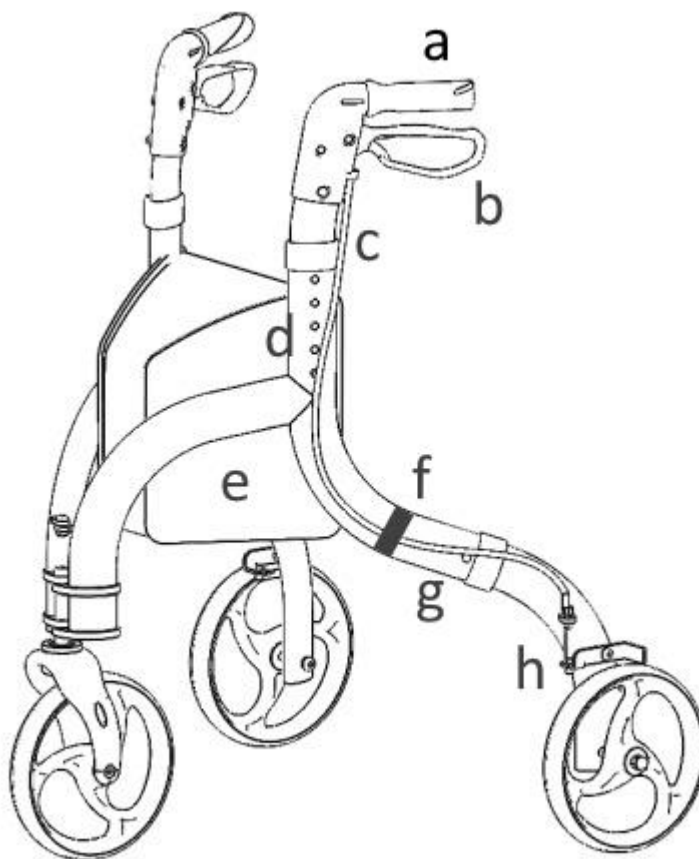

2. Zastosowanie

Podpórka trójkołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki

wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż, rozłożenie, złożenie i regulacja podpórki


Elementy montażowe:

- A. rama podpórki
- B. prawa rączka
- C. prawa nóżka z kółkiem
- D. lewa rączka
- E. lewa nóżka z kółkiem
- F. torba
- G. rzepy mocujące (2szt.)



Montaż

- Rozłożyć ramę podpórki rozsuwając obie części belki poprzecznej do momentu jej zablokowania (Rys.1).
- Włożyć lewą nóżkę do lewego tylnego otworu ramy naciskając pin blokujący nóżki (kółko z hamulcem skierowane na zewnątrz ramy) Zablokować pin w otworze ramy podpórki.
- Lewa nóżka połączona jest linką hamulcową z lewą rączką podpórki. Włożyć lewą rączkę do lewego otworu ramy naciskając pin blokujący rączki. Zablokować pin w otworze ramy podpórki ustawiając żądaną wysokość rączki.
- Linkę hamulca poprowadzić na zewnątrz ramy i zabezpieczyć rzepem mocującym (Rys.2).
- Przeprowadzić podobny montaż prawej nóżki i prawego uchwytu podpórki.

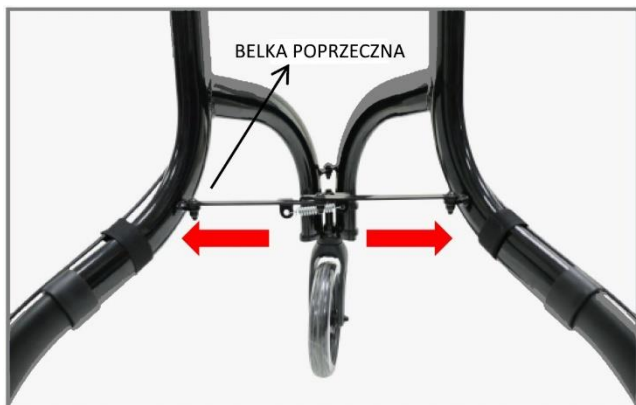

Rys.1



Rys.2

Montaż torby

- Wsunąć jeden ze wsporników w kształcie litery T z boku torby w szczelinę w górnej części ramy podpórki (Rys.3). Kieszenie torby powinny być umieszczone z tyłu podpórki, przodem do użytkownika.
- Powtórzyć tę czynność po drugiej stronie torby.



Rys.3



Rys.4

Funkcja hamulców

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć rączkę hamulca do góry w kierunku uchwytu, a następnie przytrzymać (Rys.4).
- W czasie postoju należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

Regulacja wysokości rączek


- Zablokować oba hamulce zaciskiem postojowym aby unieruchomić podpórkę.

- Nacisnąć i przytrzymać pin blokujący rączkę, a następnie wyregulować wysokość rączki.
- Zwolnić pin blokujący aby zablokować ustawioną wysokość rączki. Pociągnąć kilka razy uchwyt do góry i w dół aby sprawdzić poprawne zablokowanie wysokości.
- W podobny sposób wyregulować wysokość drugiej rączki.

Uwaga! Rączki należy ustawić na tej samej wysokości.

Złożenie i rozłożenie podpórki

- Aby złożyć zmontowaną podpórkę należy zdjąć torbę, a następnie nacisnąć i złożyć obie części belki poprzecznej (Rys.5). Następnie przytrzymać obie rączki podpórki i docisnąć je do wewnątrz.
- Aby rozłożyć zmontowaną podpórkę należy przytrzymać oba uchwyty i pociągnąć je na zewnątrz. Następnie rozłożyć obie części belki poprzecznej do momentu jej zablokowania.

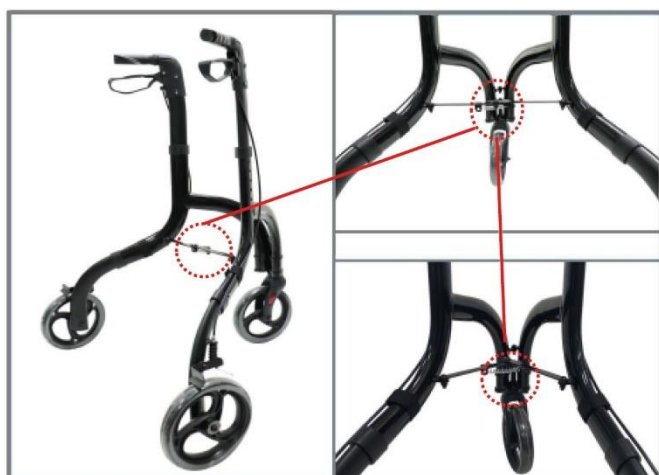

Rys.5



Rys.6

Regulacja dolnych hamulców

Za pomocą klucza płaskiego 10mm poluzować nakrętkę zabezpieczającą (Rys.6). Następnie za pomocą klucza płaskiego 8mm wyregulować napięcie hamulców (po zwolnieniu dźwigni hamulca między mechanizmem hamulca, a kołem musi być niewielka szczelina). Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą 10mm – podczas dokręcania upewnić się, że nakrętka regulacyjna pozostaje na swoim miejscu.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	68,5 cm
Długość całkowita	67 cm
Wysokość całkowita	84-94 cm
Średnica kół	8"
Waga	4,4 kg
Max obciążenie	136 kg
Max obciążenie koszyka	5 kg
Kolor ramy	czarny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!

NOTATKI:



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



10/2023(I)